

Reinigung

Tornado-Effekt

Für eine beeindruckend effektive Reinigung.
Dieses einzigartige mechanische Reinigungsinstrument
reduziert Bakterien effektiv um bis zu 98 %*.
Beeindruckend, nicht wahr?
Der Finisher entfernt auch Füllungsmaterialien.
Eine revolutionäre Universallösung, mit der jede
Reinigung Spaß macht.
Auf diese Weise setzen wir neue Maßstäbe in der
Endodontie.

Change the Game

* Azim, Adham A et al. "Efficacy of 4 Irrigation Protocols in Killing Bacteria Colonized in Dentine Tubules Examined by a Novel Confocal Laser Scanning Microscope Analysis." Journal of endodontics vol. 42.6 (2016): 928-34. doi:10.1016/j.joen.2016.03.009

Alle Infos unter:
fkf.ch/power






Finisher


25/00

800-1000 U/min – 1 Ncm


Eine Universal-lösung

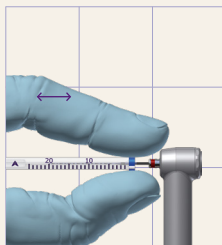

- Aufbereitung min. Ø 25.
- Die Arbeitslänge mit Hilfe des Kunststoffröhrchens einstellen.

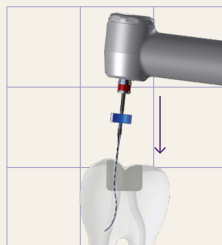

- Mit dem weitesten Kanal beginnen.
- Das Instrument Richtung Höcker einführen und den Motor starten.

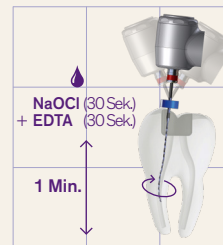

- Den Kanal für 1 Minute mit langen und sanften Bewegungen (7-8 mm) reinigen.
- Abschlussspülung durchführen.

Reinigung abgeschlossen



Weitere Infos