




swiss endo

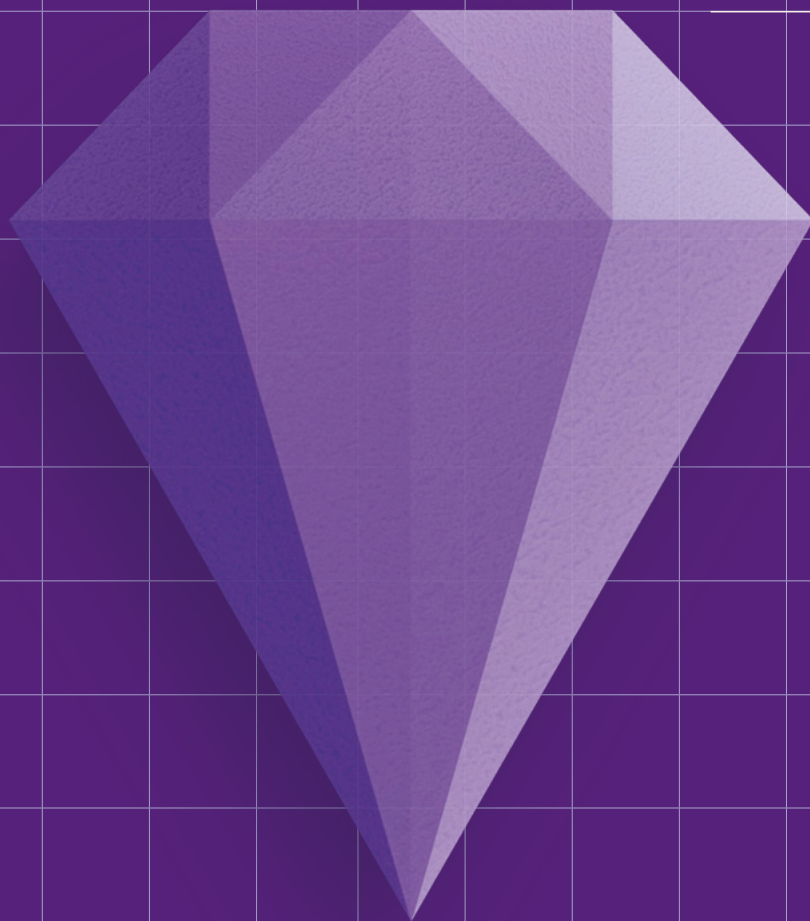

Change the Game

Strumenti rotanti

Controllo preciso

Una sequenza 1-2-3
o una sequenza su
misura?
Massima precisione,
assoluto controllo.

RACE® EVO

Innovazione nel cuore della valle svizzera della micro- tecnologia

Dal 1931, dal cuore della valle svizzera della microtecnologia, spingiamo i confini dell'endodonzia, combinando tecnologia e innovazione.

La nostra missione è fornire soluzioni che rispettino la complessa anatomia dei denti, migliorando l'efficienza del trattamento. Con innovazioni rivoluzionarie come XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher e TotalFill, abbiamo trasformato la pratica dell'endodonzia, offrendo ai medici strumenti migliori per affrontare le sfide in sicurezza.


Didier
Devaud
Direttore
generale




Strumenti rotanti

Controllo preciso

RACE EVO è così preciso che tutto sembra funzionare senza sforzo. Una breve sequenza 1-2-3 e un'ampia scelta di lime permettono di gestire con disinvoltura la maggior parte delle situazioni, da quelle di routine ai casi più complessi. RACE EVO offre controllo assoluto, consentendo di personalizzare l'intervento in ogni momento. Vorrete che tutto fosse così facile da utilizzare. Ecco come aumentiamo la performance dell'endodonzia.

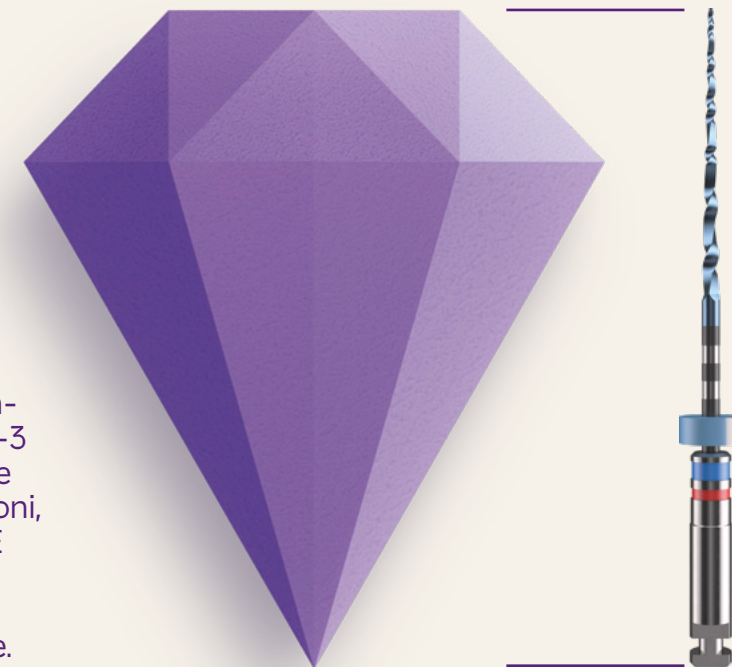


Offriamo assoluta precisione, affinché tutto funzioni senza intoppi. Una semplice sequenza 1-2-3 e un'ampia scelta di lime permette di gestire con disinvoltura la maggior parte delle situazioni, da quelle di routine ai casi più complessi.

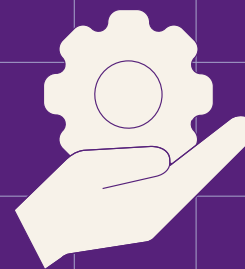


Controllo assoluto

Realizzato pensando alla precisione, il design unico di RACE EVO garantisce un'esperienza utente intuitiva, in modo da rimanere concentrati e mantenere il controllo.

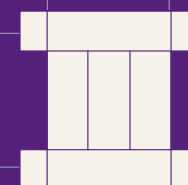

Semplice sequenza 1-2-3

RACE EVO semplifica la grande maggioranza dei trattamenti canalari, offrendo una semplice sequenza di 3 lime e regolazioni del motore uniformi su tutta la gamma.

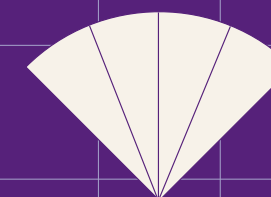

Ampia gamma

RACE EVO è una soluzione completa per la maggior parte delle situazioni cliniche. La sua ampia e varia gamma offre all'utente la possibilità di creare le proprie sequenze personalizzate.



Controllo assoluto

Con il loro profilo RaCe unico e facile da usare, le lime RACE EVO offrono manovrabilità eccezionale, senza sforzo, garantendo all'utente il massimo controllo durante gli interventi.

Forti di oltre 20 anni di comprovato successo, le lame di taglio alternate RACE EVO riducono l'effetto avvvitamento (screw-in) e aumentano la sicurezza durante la rotazione continua.

Grazie al controllo potenziato, l'utente ha sempre il pieno comando della lima, riducendo il rischio di errori iatrogeni. RACE EVO offre un'esperienza concretamente diversa, con una progressione agevole e controllata all'interno del canale radicolare, che definisce un nuovo standard nell'esperienza tattile in endodonzia.



Ampia gamma

RACE EVO offre una soluzione completa per la maggior parte degli scenari clinici, garantendo la flessibilità di adeguare il trattamento alle esigenze personali del paziente. Con una gamma ampia e variegata, è possibile creare una sequenza personalizzata che si adatta ai casi specifici che si incontrano.

La gamma RACE EVO consta di 18 referenze, incluse lime per sondaggio, per glide path e per sagomatura, quattro lime aggiuntive per glide path non trattate termicamente (RaCe).

Questa gamma unica di lime per glide path offre diverse opzioni di flessibilità e rigidità, aiutando l'operatore a scegliere la lima perfetta persino per i casi più difficili.

Semplice sequenza 1-2-3

RACE EVO offre una soluzione incredibilmente semplice: una sequenza di 3 lime in grado di gestire la maggior parte delle casistiche.

Con solo una lima per glide path, seguita da due lime di sagomatura, il workflow endodontico diventa semplice e richiede pochi strumenti.

Protocollo semplice e impostazioni del motore uniformi su tutta la gamma significano minore complessità per l'operatore e maggiore comfort per i pazienti. RACE EVO è l'essenza della semplicità: progettato per semplificare il lavoro dell'odontoiatra.



L'importanza della velocità

"Il design di RACE è stato sviluppato da FKG, pertanto questi allargacanal (reamer) con profili taglienti alternati sono l'alleato perfetto per prestazioni ad alta velocità in rotazione continua. Questo rende le lime RACE EVO incredibilmente controllabili, permettendo all'utente di ridurre al minimo il rischio di errore.

Contrariamente alla credenza popolare, la velocità elevata non è il nemico. Pensiamo a un boscaiolo che taglia un albero: se usa la motosega a bassa velocità, avvertirà una notevole resistenza e farà fatica a raggiungere il suo obiettivo.

Al contrario, se taglia lo stesso albero con una motosega funzionante alla massima velocità, procederà senza sforzo e rapidamente, nel controllo assoluto. Provare RACE EVO significa adottarlo!"

Dr. Kleber Carvalho
DDS, MSc, PhD / Sao Bernardo
do Campo, Brasile



Ti incuriosisce?
Maggiori dettagli su
RACE EVO:

Una
sequenza per
la maggior
parte delle
casistiche



GLIDE PATH

SAGOMATURA
INIZIALE

SAGOMATURA
FINALE

RE1

RE2

RE3 4%

RE3 6%



oppure

15/.04

25/.04

30/.04

25/.06

Selezionare la lima di sagomatura finale sulla
base del proprio approccio terapeutico.

Referenze



SEQUENZE			
● RACE EVO sequenza 4% (3 lime per blister)			
15/.04	}	21 mm	S1.7B0.00.SCV.FK
25/.04		25 mm	S1.7B0.00.SCW.FK
30/.04		31 mm	S1.7B0.00.SCX.FK
● RACE EVO sequenza 6% (3 lime per blister)			
15/.04	}	21 mm	S1.7B0.00.SCY.FK
25/.04		25 mm	S1.7B0.00.SCZ.FK
25/.06		31 mm	S1.7B0.00.SDA.FK
REFILL			
● ● RACE EVO 15/.04			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DG.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DH.FK
● ● RACE EVO 25/.04			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DI.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GB.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DJ.FK
● RACE EVO 30/.04			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DK.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GC.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DL.FK
● RACE EVO 40/.04			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DM.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GE.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DN.FK
● RACE EVO 50/.04			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DO.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GF.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DP.FK
● RACE EVO 25/.06			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DQ.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GH.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DU.FK
● RACE EVO 30/.06			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DV.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GI.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0DW.FK
● RACE EVO 35/.06			
	6×	21 mm	S1.7B0.00.0DX.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0GU.FK

● Approccio 4% ● Approccio 6%

PUNTE DI CARTA		
Confezione da 200 punte di carta		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.06	08.610.06.030.BC
	35/.06	08.610.06.035.BC
GUTTAPERCA		
Confezione da 60 coni in guttaperca		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE
	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.06	08.600.06.030.RE
	35/.06	08.600.06.035.RE
TOTALFILL® BC POINTS™		
Confezione da 60 punte BC		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE
	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.06	08.650.06.030.RE
	35/.06	08.650.06.035.RE
TOTALFILL® BC SEALER™		
Siringa da 2 g + 15 puntali TotalFill BC		
		08.650.00.007.XX
TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Confezione da 60 punte BC HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF
TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Siringa da 1,5 g + 15 puntali TotalFill BC		
		08.650.00.008.XX

Trova un rivenditore:



Empower Endo



FKG REF 987AA0011AT_REV2_2025-05-23 - © FKG Dentaire Sàrl - Le immagini dei nostri prodotti non sono vincolanti

Benvenuti nel cuore della valle svizzera della microtecnologia.

Da quasi un secolo reinventiamo e mettiamo costantemente in discussione ciò che pensavamo di sapere.

Ci impegniamo a creare innovazioni che introducano nuovi modi di lavorare: più rispettosi, efficienti, agili, ergonomici e sicuri, al servizio delle nuove generazioni, promuovendo nuove visioni di vita, per noi, per voi e per i pazienti.

Abbracciamo il cambiamento che migliora le performance nell'endodonzia.

FKG | Change the game.

Entra nel nostro
universo rivoluzionario



Visita il nostro
sito Internet



www.fkg.ch

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Svizzera

+41 32 924 22 44
info@fkg.ch