

Instrumentos rotativos

# Controlo preciso

Uma sequência 1-2-3  
ou personalizada?  
Mantenha a precisão,  
não perca o controlo.

**RACE® EVO**

# Inovação no coração do vale suíço da microtecnologia

Desde 1931, no coração do vale suíço da microtecnologia, que testamos os limites da endodontia ao combinar tecnologia e inovação.

A nossa missão é oferecer soluções que respeitem a anatomia complexa dos dentes, aumentando, ao mesmo tempo, a eficiência do tratamento. Com os nossos produtos inovadores, como XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher e TotalFill, transformámos a prática da endodontia, dando ferramentas melhores aos clínicos para enfrentarem os seus desafios com confiança.


Didier  
Devaud  
Diretor  
geral




## Instrumentos rotativos

# Controlo preciso

RACE EVO é tão preciso que parece que tudo se faz sem esforço. Uma curta sequência 1-2-3 e uma grande seleção de limas permitem-lhe controlar com toda a confiança a maioria das situações, das rotineiras aos casos complexos e desafiadores. RACE EVO dá-lhe o controlo absoluto e permite-lhe personalizar o seu procedimento em qualquer momento. Vai desejar que tudo na vida fosse tão fácil. É assim que damos poder à endodontia.

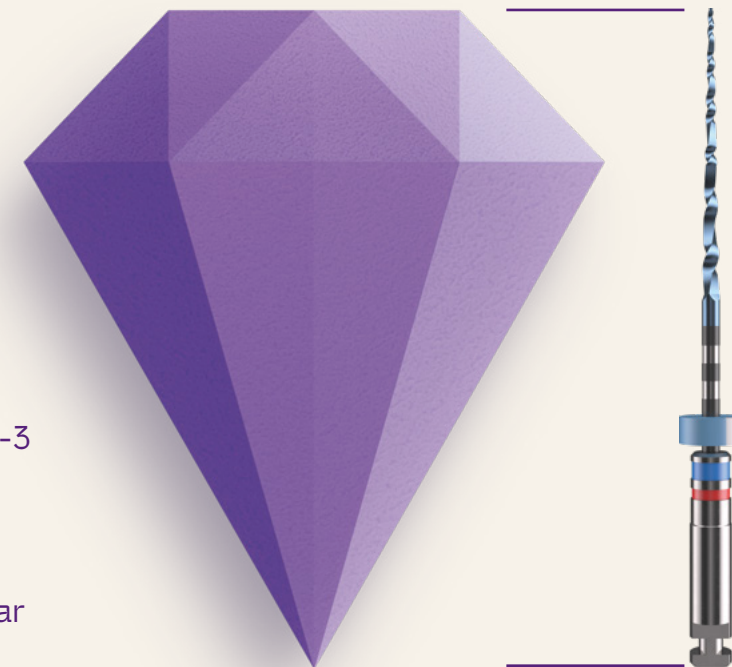


Oferecemos precisão com confiança para que tudo pareça ser feito sem esforço. Uma simples sequência 1-2-3 e uma grande seleção de limas permitem-lhe controlar com toda a confiança a maioria das situações, das rotineiras aos casos complexos e desafiadores.

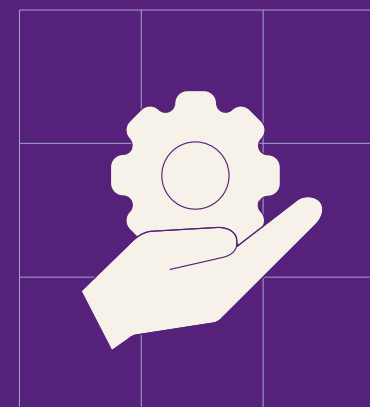


### Controlo absoluto

Concebido para a precisão, o exclusivo design de RACE EVO garante uma experiência do utilizador sem esforço, para que mantenha a precisão e o controlo.

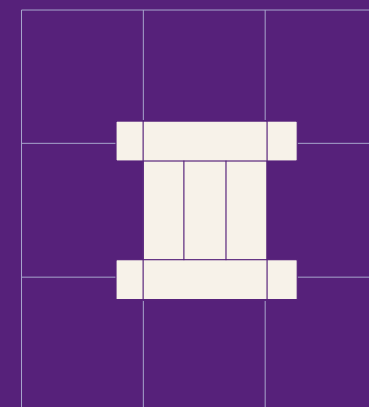

### Sequência simples 1-2-3

RACE EVO simplifica a grande maioria dos tratamentos do canal radicular ao oferecer uma sequência simples de 3 limas e definições uniformes do motor em toda a gama.

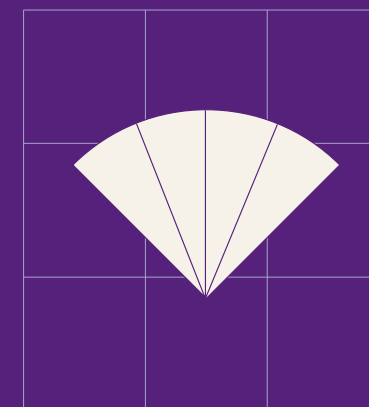

### Uma vasta gama

RACE EVO é uma solução abrangente para a maioria dos cenários clínicos. A sua gama vasta e diversa dá-lhe o poder de criar a(s) sua(s) própria(s) sequência(s) personalizada(s).





# Controlo absoluto

Com o seu perfil RaCe exclusivo e fácil de usar, as limas RACE EVO oferecem uma excelente manobrabilidade sem esforço, para que tenha o controlo total durante os procedimentos.

Assentando em mais de 20 anos de sucesso comprovado, os gumes alternados de RACE EVO reduzem o efeito de enroscamento e aumentam a segurança em rotação contínua.

Com um maior controlo, é sempre o utilizador a dominar a lima — minimizando o risco de erros iatrogénicos. RACE EVO é uma experiência tangivelmente diferente, com uma progressão fluida e controlada pelo canal radicular, que estabelece um novo padrão na experiência tátil da endodontia.



# Uma vasta gama

RACE EVO oferece uma solução abrangente para a maioria dos cenários clínicos, dando-lhe a flexibilidade para o tratamento à medida das necessidades individuais dos seus pacientes. Com uma gama vasta e variada, pode criar uma sequência personalizada de acordo com os casos em particular com que se depara.

A gama RACE EVO consiste em 18 referências, incluindo lima inicial, limas de via de permeabilidade (glide path) e de modelação, além de mais quatro limas de via de permeabilidade (glide path) sem tratamento por calor (RaCe).

Esta coleção exclusiva de via de permeabilidade (glide path) oferece diversas opções de flexibilidade e rigidez, para que possa escolher a lima perfeita até para os casos mais difíceis.

# Sequência simples 1-2-3

RACE EVO oferece uma solução impressionantemente simples: uma sequência de 3 limas, suficiente para a maioria dos casos.

Com apenas uma lima de via de permeabilidade (glide path) seguida de duas limas de modelação, o seu fluxo de trabalho endodôntico é simples e exige poucos instrumentos.

Um protocolo simples e definições uniformes do motor em toda a gama significam menor complexidade para si e mais comodidade para os seus pacientes. RACE EVO é o epítome da simplicidade, concebido para lhe facilitar o trabalho.



# A importância da velocidade

“O design de RACE foi desenvolvido pela FKG para fazer destes escareadores de gumes alternados o aliado perfeito para o desempenho de alta velocidade em rotação contínua. Isto torna as limas RACE EVO incrivelmente controláveis, minimizando o risco de erro por parte dos utilizadores.

Ao contrário da crença popular, a alta velocidade não é o inimigo. Imagine um lenhador a cortar uma árvore: se usar a motosserra a baixa velocidade, ele irá sentir uma resistência significativa e dificuldades em alcançar o seu objetivo.

Se, pelo contrário, cortar a mesma árvore à velocidade máxima da motosserra, o esforço será praticamente nulo e terminará rapidamente, mantendo controlo absoluto da tarefa. Experimentar RACE EVO é adotá-lo!”

Dr. Kleber Carvalho  
DDS, MSc, PhD/São Bernardo  
do Campo, Brasil





Curioso?  
Mais dados sobre  
RACE EVO:

Uma  
sequência  
para  
a maioria  
dos casos



VIA DE PER-  
MEABILIDADE  
(GLIDE PATH)

MODELAÇÃO  
INICIAL

MODELAÇÃO  
FINAL

RE1

RE2

RE3 4%

RE3 6%



ou

15/.04

25/.04

30/.04

25/.06

Selecione a lima de modelação final  
com base na sua abordagem terapêutica.

Referências

SEQUÊNCIAS			
● Sequência RACE EVO 4% (3 limas por blister)			
15/.04	}	21mm	S1.7B0.00.SCV.FK
25/.04		25mm	S1.7B0.00.SCW.FK
30/.04		31mm	S1.7B0.00.SCX.FK
● Sequência RACE EVO 6% (3 limas por blister)			
15/.04	}	21mm	S1.7B0.00.SCY.FK
25/.04		25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK
25/.06		31mm	S1.7B0.00.SDA.FK
RECARGA			
● ● RACE EVO 15/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODG.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODH.FK
● ● RACE EVO 25/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODI.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GB.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODJ.FK
● RACE EVO 30/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODK.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GC.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODL.FK
● RACE EVO 40/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODM.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GE.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODN.FK
● RACE EVO 50/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODO.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GF.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODP.FK
● RACE EVO 25/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODQ.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GH.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODU.FK
● RACE EVO 30/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODV.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GI.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.ODW.FK
● RACE EVO 35/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.ODX.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0GU.FK

● Abordagem 4% ● Abordagem 6%



PONTAS DE PAPEL		
Caixa de 200 pontas de papel		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.06	08.610.06.030.BC
	35/.06	08.610.06.035.BC
GUTA-PERCHA		
Caixa de 60 guta-percha		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE
	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.06	08.600.06.030.RE
	35/.06	08.600.06.035.RE
TOTALFILL® BC POINTS™		
Caixa de 60 pontas BC		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE
	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.06	08.650.06.030.RE
	35/.06	08.650.06.035.RE
TOTALFILL® BC SEALER™		
Seringa 2 g + 15 pontas TotalFill BC		
		08.650.00.007.XX
TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Caixa de 60 pontas BC HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF
TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Seringa 1,5 g + 15 pontas TotalFill BC		
		08.650.00.008.XX

Procurar um parceiro:



# Empower Endo



FKG REF: 997AA.001JA.PT\_REV2\_2025-05-23 - © FKG Dentaire Sàrl - As figuras dos nossos produtos não são contratuais

## Bem-vindo ao coração do vale suíço da microtecnologia.

Há quase um século que nos reinventamos continuamente, desafiando aquilo que julgávamos saber.

Damos o nosso melhor para inovar a forma de trabalhar: mais respeitosa, mais eficiente, mais ágil, mais ergonómica e mais segura — em prol das novas gerações, promovendo novas perspetivas da vida, para nós, para si e para os seus pacientes.

Acolhemos a mudança que dá poder à endodontia.

FKG | Change the game.

Entre no nosso  
universo inovador



Consulte  
o nosso site



[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

FKG Dentaire Sàrl  
Le Crêt-du-Loche 4  
2322 Le Crêt-du-Loche  
Suíça

+41 32 924 22 44  
[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)